


6 Devolución

Para devolver la muestra, coloque todos los tubos etiquetados y la lámina absorbente en la bolsa de riesgo biológico y séllela.

Inserte el formulario de solicitud de prueba completado o la tarjeta de información de la muestra en el segundo bolsillo de la bolsa de riesgo biológico.

Coloque la bolsa de riesgo biológico sellada en la caja GeneDx y ciérrela.

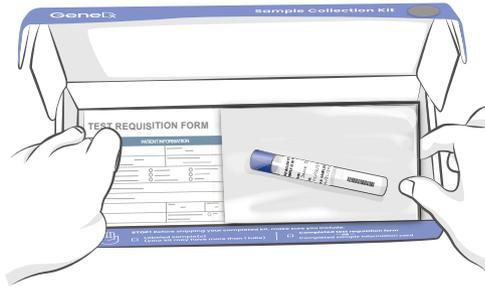

Coloque la caja dentro del paquete clínico de FedEx, quite la tira adhesiva y selle el paquete de FedEx. Adjunte la etiqueta de FedEx en el exterior del paquete.

Llame a FedEx al (800) 463-3339 para programar una recolección o dejarla en una oficina local de FedEx. Puede encontrar la oficina de FedEx más cercana a usted llamando a FedEx o visitando [FedEx.com/locate](https://www.fedex.com/locate).



IMPORTANTE

Antes de sellar y enviar el kit completo, asegúrese de incluir:

Muestras etiquetadas con nombre, fecha de nacimiento y fecha de recolección (por ejemplo, el tubo o ambos tubos)

Las muestras no etiquetadas no se procesarán.

Formulario de solicitud de prueba completado

—○—
Tarjeta de información de muestra completada

GeneDx

Recolección de muestras orales (hisopo oral de la mejilla)

Lea estas instrucciones completas antes de recolectar la muestra.

También puede escanear este código QR, usando la cámara de su teléfono móvil, para ver un breve video con instrucciones de toma de muestras orales de las mejillas o visitar [GeneDx.com/Buccal](https://www.genedx.com/Buccal).



Saque todo fuera de la caja GeneDx y póngalo en una mesa/mostrador frente a usted.

1 Preparación

No beba, no coma nada (incluyendo chicles, mentas, patillas o dulces duros) ni fume durante al menos 30 minutos antes de tomar la muestra.



GeneDx


207 Perry Parkway, Gaithersburg, MD 20877
T 1 (888) 729-1206 o 1 (301) 519-2100
F 1 (201) 421-2010

support@genedx.com • www.genedx.com


©2022 GeneDx, LLC. Todos los derechos reservados

2 Muestra

Saque un hisopo oral de su paquete sellado sin tocar la punta de la esponja o sacarlo del tubo.

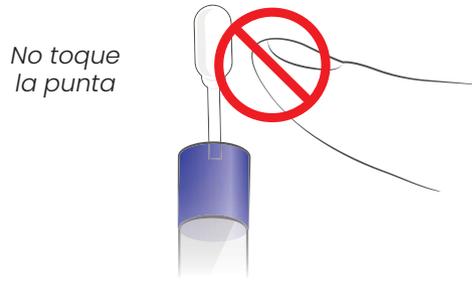

Coloque la esponja en la parte superior interna de la mejilla izquierda, en el espacio donde las encías superiores se unen a la mejilla. Deslice (o arrastre) a lo largo de esta área con un movimiento de ida y vuelta por lo menos 10 veces. Repita el movimiento de arrastre en los lados medio e inferior de la mejilla izquierda. **Recuerde: no frotar los dientes.**

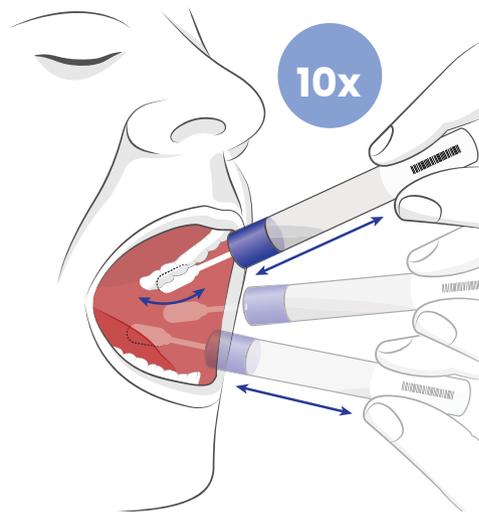

3 Sacudir


Sostenga el tubo en posición vertical para evitar que se derrame algo. Desenrosque el tapón azul, póngalo boca abajo e introduzca la esponja en el tubo con la solución. Cierre bien la tapa. Agite con fuerza, hacia arriba y hacia abajo 10 veces. **Repita los pasos 2 y 3 utilizando el segundo hisopo en la mejilla derecha.**



Agite la muestra sellada con fuerza 10 veces

4 Etiqueta

Complete las etiquetas que se le dieron, con el nombre y la fecha de nacimiento de la persona cuya muestra está dentro de los tubos, como la fecha en que se recolectó la muestra. Coloque las etiquetas en cada uno de los tubos.

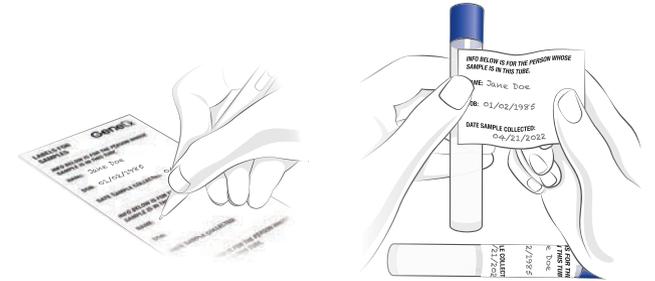

Recordatorio: todos los tubos deben estar etiquetados. Las muestras no etiquetadas no se procesarán.

5 Información de muestra

Recordatorio: cada muestra DEBE ir acompañada de un formulario de solicitud de prueba completado (preferido) o una tarjeta de información de muestra completa. **Las muestras presentadas sin este formulario o tarjeta no se procesarán.**

